



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электрическая звуковая  
зубная щетка  
CS Medica KIDS CS-360



Благодарим Вас  
за приобретение  
электрической звуковой  
зубной щетки  
CS Medica KIDS CS-360



Одобрено  
Стоматологической  
Ассоциацией России



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в настоящем руководстве по эксплуатации.  
При покупке требуются правильное его заполнения: предоставление печати продавца и даты продажи.

Данная зубная щетка предназначена для проведения гигиены полости рта у детей от 3-х лет.

### 1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



#### Предупреждение:

Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к серьезной травме.

- Зубная щетка не является игрушкой и содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены ребенком. Храните ее в недоступном для детей месте.
- Вне зависимости от степени участия взрослых в процессе чистки зубов ребенка, данная процедура должна всегда проводиться под контролем взрослых.
- Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием устройства, если к Вам относится что-либо из нижеследующего:
  - чувствительные зубы или десны;
  - недавно перенесенная периодонтальная хирургическая операция;
  - прохождение курса лечения, связанного с проблемами в ротовой полости.
- Прекратите использовать устройство и проконсультируйтесь со своим стоматологом, если у Вас наблюдается сильная кровоточивость десен после недели пользования данной зубной щеткой.
- При выборе зубной пасты рекомендуется проконсультироваться со своим стоматологом. Детям не рекомендуется использование пасты с содержанием абразивных веществ.
- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.



#### Внимание:

Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к незначительной травме, травме средней тяжести или порче имущества.

- Данное устройство предназначено только для ухода за полостью рта человека в домашних условиях.
- Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально.
- Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам слишком сильно и не касайтесь их никакими другими пластиковыми деталями щетки, кроме щетины. Не чистите одну область в течение продолжительного времени.
- Не используйте элементы питания, не указанные для данного устройства. Вставляйте элемент питания, соблюдая полярность.
- Извлеките элемент питания из зубной щетки, если Вы не собираетесь пользоваться ею в течение длительного времени (от трех месяцев).
- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвержайте сильному ударному воздействию.
- Нажимайте на кнопку подушечкой пальца, а не ногтем, чтобы не повредить поверхность кнопки.

### 2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Зубная щетка CS-360 рекомендуется для чистки зубов детей в возрасте от 3-х лет.



Дополнительно можно приобрести: насадки CS Medica SP-60 для электрической звуковой зубной щетки CS Medica KIDS CS-360 (в комплекте 2 насадки).

### 3. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

#### Насадка 360°

Оригинальная форма насадки 360° обеспечивает оптимальную технику чистки зубов и позволяет охватывать даже самые труднодоступные участки ротовой полости. Отсутствие в конструкции головки насадки пластиковой части позволяет не беспокоиться о том, под каким углом разместит насадку во рту - щетинки в любом случае будут касаться зубов, нет риска повредить зубы и десны пластиковыми частями.

#### Умный таймер

Щетка оснащена умным таймером, который делает паузу каждые 30 секунд, чтобы сориентировать пользователя на равномерную очистку каждого из четырех квадрантов ротовой полости, и отключает прибор по прошествии двух минут – времени, рекомендованного стоматологами для чистки зубов.

#### Подсветка

Подсветка насадки позволяет Вам следить за ходом чистки зубов Вашего ребенка и сделать эту процедуру увлекательной.

#### Рукоятка на присоске


Благодаря наличию присоски на рукоятке можно не беспокоиться о том, что щетка упадет и сломается, ее можно надежно закрепить на поверхности раковины.

#### Привлекательный дизайн


Рукоятка зубной щетки выполнена в форме забавной зверушки, которая непременно понравится малышу, а чистка зубов из скучного ритуала превратится в увлекательный процесс.

### 4. УСТАНОВКА/ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

1. Откройте отсек для элементов питания, руководствуясь схемой ниже.

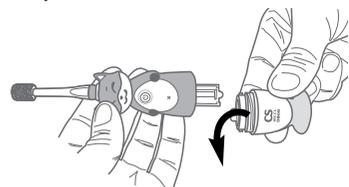

2. При помощи отвертки открутите винт и снимите защитную панель.

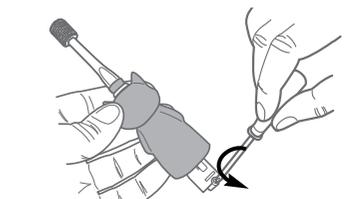

3. Установите новый элемент питания типа AAA, соблюдая полярность, указанную на гравировке внутри отсека для элемента питания.




#### Примечание:

Перед тем как вставлять элемент питания, насухо вытрите руки и корпус зубной щетки.

4. Установите на место защитную панель и закрутите винт при помощи отвертки.

5. Закрутите крышку, совместите направляющие на крышке батарейного отсека и рукоятке.

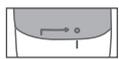

#### Примечание:


Если отсек для элемента питания закрыт неплотно, в корпус устройства может попасть вода и вызвать нарушения в работе зубной щетки.

- Срок службы элемента питания зависит от его модели, времени использования, силы, прилагаемой во время чистки, и иных факторов. Замените батарею, когда движения щетки станут более слабыми.
- Время работы от одной щелочной (щелочной) батареи составляет около 120 дней при условии, что щетка используется 2 раза в день по 2 минуты. Так как прилагаемая батарея предназначена и для демонстрационных целей, она может проработать менее 120 дней.
- Рекомендуем использовать щелочные (щелочные) элементы питания типа AAA.

Отвертка в комплекте предназначена исключительно для целей, указанных в пункте 4. «Установка/замена элемента питания» текущего руководства по эксплуатации. Гарантийный срок и срок службы не установлены.

### 5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ

Снимите насадку, руководствуясь схемой ниже.

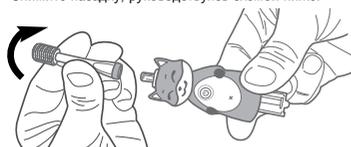

Чтобы установить насадку, совместите направляющие на основании насадки и рукоятке.

### 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Смочите щетку водой и выдавите на нее немного зубной пасты. После этого поместите щетку в ротовую полость.


#### Примечание:

Чтобы предотвратить разбрызгивание зубной пасты, включайте и выключайте зубную щетку только при ее нахождении во рту.

2. Включите питание, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. После однократного нажатия на кнопку включается подсветка насадки. После следующего нажатия головка щетки начинает вибрировать, при этом подсветка остается включенной.

Аккуратно касайтесь зубов и десен щетинками, медленно перемещая головку щетки по зубам в горизонтальном направлении, последовательно проводя чистку всей поверхности зубов.

### ПРАВИЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ

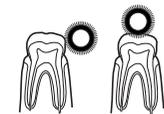

Поверхность зуба и окклюзионная поверхность.



Граница между зубами и десной.



Задняя сторона резцов или область неровно расположенных зубов: вертикально прижимайте головку щетки к зубу и очищайте их по очереди, учитывая угол расположения зубов.

3. Завершив чистку зубов, не вынимая щетку из рта, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить зубную щетку.

4. Промойте головку щетки проточной водой. Аккуратно стряхните излишек воды.

### 7. УХОД И ХРАНЕНИЕ


- Держите зубную щетку в чистоте.
- Удаляйте загрязнения с корпуса щетки мягкой сухой тканью. При необходимости смачивайте ткань в воде или мягком моющим средстве. Загрязненную поверхность также можно смочить водой, а затем протереть тканью.
- Несмотря на то что щетка является водонепроницаемой, не погружайте ее в воду на длительное время.
- Не используйте для очистки летучие органические соединения, такие как бензин и растворители. Это может испортить нанесенную краску или привести к повреждению устройства.
- После каждого использования промывайте щетину водой.
- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвержайте сильному ударному воздействию.
- Храните щетку в недоступном для детей месте.
- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Заменяйте насадку для щетки не реже одного раза в три месяца.

### 8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica KIDS
Модель	CS-360
Потребляемая мощность	0,18 Вт
Источник питания	AAA x 1
Время работы от одного элемента питания	120 дней (при условии использования 2 раза в день по 2 минуты)
Частота колебаний	17 000 движ./мин.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха	от 0 до 40°C
относительная влажность	от 30 до 85%
Условия хранения и транспортирования: температура окружающего воздуха	от -10 до 50°C
относительная влажность	от 10 до 95%
атмосферное давление	от 70 кПа до 106 кПа
IPX	IPX7
Масса	43,5 г
Габаритные размеры	110,4 x 31,4 x 31,0 мм
Срок службы	Рукоятка (электронный блок) – 2 года Насадка – 3 месяца Элемент питания – устанавливает производитель этого элемента питания Отвертка – не установлен
Комплект поставки	Рукоятка (электронный блок) с насадкой, щелочный элемент питания типа AAA, мини-отвертка, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

**IPRX** Степень защиты корпуса зубной щетки от проникновения воды.

**EAC** Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза

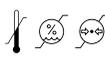 Температурный диапазон / Диапазон влажности и / Ограничение атмосферного давления

 Возможности утилизации использованной упаковки. XX – цифровое обозначение материала упаковки. YYYYY – буквенное обозначение материала упаковки

- 1 Полиэтилентерефталат
- 2 Бумага
- RET Полиэтилентерефталат
- PAR Бумага

**Гарантийный талон**  
**Сроки гарантии:**  
**рукоятка (электронный блок) — 2 года**  
**насадка — 3 месяца**  
**отвертка — не установлен**

Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_  
Подпись продавца \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Дата обращения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Заключение мастера, выполненные работы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Подпись и штамп мастера \_\_\_\_\_

Работу принял \_\_\_\_\_  
(подпись клиента)

### 9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства зашифрована в серийном номере, который находится на упаковке щетки и имеет структуру YUMNNNNN, где YU обозначает последние две цифры года производства. М – номер месяца производства (1–9 соответствует месяцам с января по сентябрь, X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь). NNNNN – порядковый номер изделия, а также в LOT номере, который расположен в отсеке для элементов питания и имеет структуру YUMNNN, где YU обозначает последние две цифры года производства, М – номер месяца производства (1–9 соответствуют месяцам с января по сентябрь, X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь), NNN – номер партии.

### 10. УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Ни одна из деталей прибора не предназначена для обслуживания пользователем. При обнаружении дефектов обращайтесь в ближайший к Вам центр технического обслуживания продукции торговой марки CS Medica (адреса сервисных центров указаны в конце данного руководства по эксплуатации).

Проблема	Возможная причина	Способ решения
Зубная щетка не включаеться	Элемент питания исчерпал свой ресурс.	Установите новый элемент питания (см. п. 3).
Колебания щетины отсутствуют, слышим медленные и слабые.	Вы слишком сильно прижимаете щетину к поверхности зубов.	Во время чистки слегка касайтесь щетиной поверхности зубов.



### Надлежащая утилизация продукта (отработанные электрическое и электронное оборудование)

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании своего срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отнесите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов. Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки. По вопросу утилизации элементов питания обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть батареи для экологически безопасной переработки.

### 11. СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Свидетельство о государственной регистрации  
№ КГ.11.01.09.014.R.00044.01.21 от 19.01.2021.  
Срок действия до 19.01.2026.  
Декларация о соответствии ЕАЭС  
N RU Д-СН.PA01.B.90326/21 от 25.05.2021.  
Срок действия до 25.05.2026.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Декларация о соответствии ЕАЭС  
N RU Д-СН.PA01.B.15823/21 от 25.02.2021  
Срок действия до 25.01.2026.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

 **Произведено по заказу и под контролем ООО «СиЗс Медика», импортера и уполномоченного представителя производителя, официального представителя торговой марки CS Medica на территории Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза**

**127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3, комната 9**  
**Тел:** (495) 363-16-52  
**Тел./факс:** (495) 363-16-56  
**E-mail:** csinfo@csmedica.ru  
**www.csmedica.ru, csizmedica.rp**  
Часы работы: пн–пт: с 9:30 до 18:00 (без перерыва на обед) сб, вс и праздничные дни – выходной

**Центр технического обслуживания в Москве: ООО «СиЗс Медика ТехЭксперт»**  
127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3, комната 14 (м. «Маяковская»)  
**Тел/факс:** (499) 995-11-32 (многоканальный)  
**E-mail:** cstechexpert@mail.ru  
**www.cstechexpert.ru**  
Часы работы Центра технического обслуживания в Москве: пн–пт: с 9:30 до 19:00 (без перерыва на обед), сб: с 10:00 до 18:00 (без перерыва на обед), вс и праздничные дни – выходной



**Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80**

**Производитель:**  
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD  
(НИНБО СИГОУ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД)  
No.239 Jianghu Road, Zone C Hongtang Industrial Park, Jiangbei District, Ningbo, China  
(№ 239 Цзянху Родд, Зоун С Гонганг Индустриал Парк, Цзянбэй Дистрикт, Нинбо, Китай)  
Сделано в Китае

### АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКЦИИ CS MEDICA В РОССИИ

- Арзамас, ООО «СиЗс Медика Поволжье», ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: (831) 472-96-05, arz\_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СиЗс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Тимирязева, д. 26, тел.: (86137) 58-202, cs\_medicat@mail.ru
- Архангельск, ООО «СиЗс Медика Поморье», ул. Суворова, 2, оф. 7, тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, pomorie@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СиЗс Медика Астрахань», ул. Боевая, д. 134, корп.5 тел.: (8512) 38-20-78, csmedica30@mail.ru
- Барнаул, ООО «СиЗс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 1886, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22, cs-barناول@mail.ru
- Белгород, ООО «СиЗс Медика Белгород», ул. Архиверейская, д. 2А, оф. 11, тел.: (4722) 42-12-94, cs-belmed@mail.ru
- Благовещенск, ООО «СиЗс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Калинин, д. 103, оф. 215, тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-25, csmedica-altur@yandex.ru
- Братск, ООО «СиЗс Медика Иркутск», ул. Мира, д. 41 тел.: (3953) 36-29-28, bratsk@csmedica.ru
- Бранск, ООО «СиЗс Медика Брянск», 2-й Советский пер., д. 3, оф. №1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-byrgansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СиЗс Медика Северо-Запад», ул. Мерецкова-Волосова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75, novgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СиЗс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-06-57, 60-60-28, csmedica-vm@mail.ru
- Владимир, ООО «СиЗс Медика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-64-47, csmedica-vladimir@mail.ru
- Волгоград, ООО «СиЗс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, оф.24, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «СиЗс Медика Вологда», Советский пр-т., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedica@volodga.ru
- Воронеж, Офис «СиЗс Медика Черноземье», ул. Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10, тел.: (473) 255-08-73, (473) 255-08-76, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Степана Разина, д. 37, оф. 7, 11, тел.: (473) 232-03-58, (473) 255-08-71, (910) 732-03-58, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, Офис ООО «СиЗс Медика Урал», ул. Тургнева, д. 30А, тел.: (343) 222-74-75, region66@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Тургнева, д. 30А, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service66@csmedica.ru
- Иваново, ООО «СиЗс Медика Ярославль», ул. Степанова, дом 5, оф. 105, (4932) 26-76-90, 26-76-70, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «СиЗс Медика Вятка» (Киров), ул. 40 лет Победы, д. 122, тел.: (3412) 377-545, 377-664, csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СиЗс Медика Иркутск», ул. Лепулатская, д. 79, пом. 30, тел.: (3952) 48-74-74, (3952) 43-69-05, csizmedica@csmedica.ru
- Йошкар-Ола, ООО «СиЗс Медика Чекбоксары», пр-т Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, csm@tari-el.ru
- Казань, ООО «СиЗс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, cskzn@mail.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843)528-01-70, cskzn@mail.ru
- Калининград, ООО «СиЗс Медика Калининград», ул. Нарвская, д. 49а, оф. 206, тел.: (4012) 95-38-65, 8 (863) 737-79-94, kaliningrad@csmedica.ru
- Калуга, ООО «СиЗс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 6, тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, (903) 636-50-69, csmedica\_kaluga@mail.ru
- Кермерово, ООО «СиЗс Медика Кермерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60, kermerovo@csmedica.ru

- Киров, ООО «СиЗс Медика Вятка», Студенческий пр-т, д. 19, корп. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, cs43@mail.ru
- Кострома, ООО «СиЗс Медика Ярославль», пр-т Мира, д. 51, оф.7, тел.: (4942) 63-77-79, (4942) 55-28-73, csmedica-kostroma@mail.ru
- Краснодар, Офис ООО «СиЗс Медика Кубань», ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90, otorgon@kubanet.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.: (861) 238-47-95, service2@csmedica.ru
- Красноярск, ООО «СиЗс Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (931) 221-24-83, 221-22-72, 221-60-98, info@csmedicaenisey.ru
- Курск, ООО «СиЗс Медика Курск», ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, csmedica-kursk@yandex.ru
- Липецк, ООО «СиЗс Медика Липецк», ул. Политехническая, д. 3, тел.: (4742) 25-60-16, (4742) 25-60-12, lipetsk@csmedica.ru
- Магнитогорск, ООО «СиЗс Медика Челябинск», ул. Октябрьская, д. 9, тел.: (3519) 29-49-14, mtr@csmedica.ru
- Махачкала, ООО «СиЗс Медика Махачкала», ул. Богатерова, д. 11а, корп. 119, подъезд № 5, тел.: (928) 941-00-20, director5@csmedica.ru
- Минеральные Воды, ООО «СиЗс Медика Северный Кавказ», ул. Новосолов, д. 106, тел.: (87922) 6-02-31, факс: 6-06-48, csmedicakmv@mail.ru
- Мурманск, ООО «СиЗс Медика Карелия» (Петрозаводск), пр-т Кольский, д. 196, 2 этаж тел.: (8152) 52-53-43, murtmansk@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «СиЗс Медика Казань», пр-т Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, sngut@csmedica.ru
- Тамбов, ООО «СиЗс Медика Тамбов», ул. Орехова, д. 10, пом. 1, тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СиЗс Медика Тверь», пр-т Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, (4822) 65-65-52, tver@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «СиЗс Медика Самар», б-р Га, д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74-88-89, tt@csmedica.ru
- Томск, ООО «СиЗс Медика Томск», ул. Пушкина 18, стр. 1, подъезд №3, 2 этаж, тел.: (3822) 902-703, info\_tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «СиЗс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 149, тел.: (4872) 36-80-56, tu@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СиЗс Медика Тюмень», ул. Амурская, д. 4, оф. 6, тел.: (3452) 34-22-70, (919) 944-10-11, cstumen@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СиЗс Медика Иркутск», ул. Терешковой д. 26, пом. 23, тел.: (3012) 210-428, 210-378, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СиЗс Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica.uin@yandex.ru
- Уфа, ООО «СиЗс Медика Башкортостан», ул. Натальи Ковшовой, д. 10, пом.21-24, 30, тел.: 8(347) 200-09-03, 8-900-500-1105, csmedica.ufa@mail.ru
- Пенза, ООО «СиЗс Медика Пенза», ул. Калинин, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СиЗс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, pergm@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СиЗс Медика Карелия», ул. Маршала Мерецкова, д. 16, оф. 6, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СиЗс Медика Северо-Запад», ул. Леони Поземского, д. 10, пом. 1001, тел.: (911) 885-07-56, pskov@csmedica.ru
- Росошь, ООО «СиЗс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rsoosch@csmedica.ru
- Ростов-на-Дону, ООО «СиЗс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85, (863) 231-03-86, (863) 231-04-85, (863) 231-04-86, (863) 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СиЗс Медика Рязань», ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, gyzan@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «СиЗс Медика Самара», ул. Советской Армии, дом 180, стр. 3, оф. 405,

- тел.: (846) 250-15-79, 250-15-81, 250-51-18, samara@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Советской Армии, дом 180, стр. 3, оф. 406, тел.: (846) 254-14-19, csmedica-samara@samara.ru
- Санкт-Петербург, Офис ООО «СиЗс Медика Северо-Запад», Малодетскийский пр-т, д. 36, тел.: (812) 467-46-26, csnw@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, Малодетскийский пр-т, д. 36, лит. Н, тел. (812) 409-40-30, srbnsw@csmedica.ru
- Саранск, ООО «СиЗс Медика Саранск», ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, этаж 2, комната №22, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru
- Саратов, ООО «СиЗс Медика Саратов», ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, saratov@csmedica.ru
- Саров, ООО «СиЗс Медика Поволжье» (Н. Новгород), пр-т Октябрьский, д. 18, тел.: (950) 360-70-77, arz\_cs1@bk.ru, arz\_cs@bk.ru
- Симферополь, ООО «СервисМедика Крым», ул. Жильцовых, д. 4, пом. 2, тел.: (978) 137-90-68, (978) 137-90-68, director@csmedica.ru
- Смоленск, ООО «СиЗс Медика Смоленск», ул. 2-я Линя Красноармейской Слободы, д. 5, тел.: (4812) 35-85-88, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «СиЗс Медика Кубань» (Краснодар), Центральный район, ул. Костютичи, д. 441, тел.: (8622) 61-57-65, cs\_medicasochi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «СиЗс Медика Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, оф.3, тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicavst@mail.ru
- Сургут, ООО «СиЗс Медика Тюмень», ул. Мелик-Карамова, д. 64, каб. №3, тел.: (4642) 255-25-17, (922) 074-32-72, surgut@csmedica.ru
- Тамбов, ООО «СиЗс Медика Тамбов», ул. Орехова, д. 10, пом. 1, тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СиЗс Медика Тверь», пр-т Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, (4822) 65-65-52, tver@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «СиЗс Медика Самар», б-р Га, д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74-88-89, tt@csmedica.ru
- Томск, ООО «СиЗс Медика Томск», ул. Пушкина 18, стр. 1, подъезд №3, 2 этаж, тел.: (3822) 902-703, info\_tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «СиЗс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 149, тел.: (4872) 36-80-56, tu@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СиЗс Медика Тюмень», ул. Амурская, д. 4, оф. 6, тел.: (3452) 34-22-70, (919) 944-10-11, cstumen@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СиЗс Медика Иркутск», ул. Терешковой д. 26, пом. 23, тел.: (3012) 210-428, 210-378, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СиЗс Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica.uin@yandex.ru
- Уфа, ООО «СиЗс Медика Башкортостан», ул. Натальи Ковшовой, д. 10, пом.21-24, 30, тел.: 8(347) 200-09-03, 8-900-500-1105, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СиЗс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Чкалова, д. 124, оф. 116, тел.: 8(3022) 21-05-05, 8 (914) 368-56-05, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, ООО «СиЗс Медика Ростов-на-Дону», ул. Ионова, д. 110а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuhti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СиЗс Медика Ярославль», ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18, тел.: (4852) 20-12-50, 73-11-82, 90-66-53 cs-yr76@yandex.ru