



СиЭс МЕДИКА

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# SonicPulsar

Электрическая звуковая зубная щетка  
CS Medica  
SonicPulsar CS-161



**Благодарим Вас за приобретение зубной щетки SonicPulsar CS-161.**

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в настоящем руководстве по эксплуатации. При покупке требуйте правильного его заполнения; предоставления печати продавца и даты продажи.

## 1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



### Предупреждение:

Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к серьезной травме.

- Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием устройства, если к Вам относится что-либо из нижеследующего:
  - чувствительные зубы или десны;
  - недавно перенесенная периодонтальная или стоматологическая хирургическая операция;
  - прохождение курса лечения, связанного с проблемами в ротовой полости.

- Прекратите использовать устройство и проконсультируйтесь со своим стоматологом, если у Вас наблюдается сильная кровоточивость десен после недели пользования данной зубной щеткой.

- Считается, что абразивные вещества, содержащиеся в зубной пасте для удаления пятен от табака или отбеливания зубов, могут серьезно повредить эмаль в случае их продолжительного использования. Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед тем, как начать использование зубных паст с повышенным содержанием абразивных веществ.

- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

- Храните щетку в недоступном для детей месте.

- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.

- Дети должны использовать зубную щетку только под присмотром взрослых.



### Внимание:

Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к незначительной травме, травме средней тяжести или порче имущества.

- Данное устройство предназначено только для ухода за полостью рта человека в домашних условиях.

- Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально.

- Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам слишком сильно и не касайтесь их никакими другими пластиковыми деталями щетки, кроме щетины. Не чистите одну область в течение продолжительного времени.


- Не используйте элементы питания, не указанные для данного устройства. Вставляйте элемент питания, соблюдая полярность.

- Извлеките элемент питания из зубной щетки, если Вы не собираетесь пользоваться ею в течение длительного времени (от трех и более месяцев).

- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвергайте сильному ударному воздействию.

- Нажимайте на кнопку подушечкой пальца, а не ногтем, чтобы не повредить поверхность кнопки.

## 2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

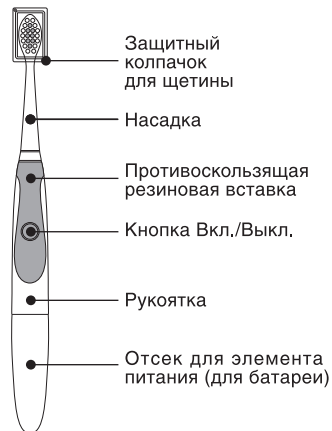

Дополнительно можно приобрести: Насадки CS Medica SP-11 для электрической звуковой зубной щетки CS-161 (В комплекте 2 насадки).


## 3. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

1. Поверните крышку отсека для элемента питания против часовой стрелки и снимите ее.



2. Установите алкалиновую (щелочную) батарею типа AAA таким образом, чтобы положительный (+) и отрицательный (-) контакты совпали с полярностью, указанной в отсеке для элемента питания.


Батарея типа AAA

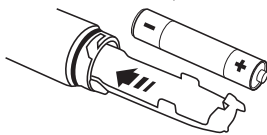

### Примечание:

Перед тем как вставлять батарею, насухо вытрите руки и корпус зубной щетки.

3. Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке. Поворачивайте крышку до тех пор, пока знаки «точка» и «тире» не совместятся на обратной стороне рукоятки.

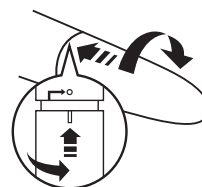

### Примечание:

Если отсек для элемента питания закрыт неплотно, в корпус устройства может попасть вода и вызвать нарушения в работе зубной щетки.

- Срок службы элемента питания зависит от его модели, времени использования, силы, прилагаемой во время чистки, и иных факторов. Замените батарею, когда движения щетки станут более слабыми.


- Время работы от одной алкалиновой (щелочной) батареи составляет около 150 дней при условии, что щетка используется 2 раза в день по 2 минуты. Так как прилагаемая батарея рассчитана для демонстрационных целей, она может проработать менее 150 дней.

- Рекомендуем использовать алкалиновые (щелочные) элементы питания типа AAA.

## 4. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ

Установите насадку на рукоятку, совместив направляющие на насадке и рукоятке, и поверните ее по часовой стрелке до упора, как показано на рисунке ниже.

Для того чтобы снять насадку, необходимо проделать те же действия в обратном порядке.

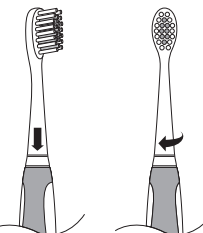

### Примечание:

Не прилагайте излишних усилий при установке насадки.


## 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Смочите щетку водой и выдавите на нее немного зубной пасты. После этого введите щетку в ротовую полость.

### Примечание:

Чтобы предотвратить разбрызгивание зубной пасты, включайте и выключайте зубную щетку только при ее нахождении во рту.

2. Включите питание, нажав на кнопку Вкл./Выкл.

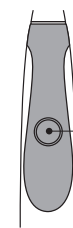

Для того чтобы включить, нажмите один раз. Нажмите еще раз, чтобы выключить.

Головка щетки начинает вибрировать. Аккуратно касайтесь зубов и десен щетинками, медленно перемещая головку щетки по зубам в горизонтальном направлении, последовательно проводя чистку всей поверхности зубов.

### Правильная чистка зубов:



### Поверхность зуба и окклюзионная поверхность:

Во время чистки держите щетину под углом 90° к поверхности зуба.



### Граница между зубами и десной:

Во время чистки держите щетину под углом 45° к поверхности зуба.

### Задняя сторона резцов или область неровно расположенных зубов:

Вертикально прижмите головку щетки к зубу и очищайте их по очереди, учитывая угол расположения зубов.



3. Завершив чистку зубов, не вынимая щетку изо рта, нажмите на кнопку Вкл./Выкл, чтобы выключить зубную щетку.

4. Промойте головку щетки под проточной водой. Аккуратно стряхните излишек воды.

5. Если требуется, установите защитный колпачок на головку щетки.

## 6. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Держите зубную щетку в чистоте.

- Удаляйте загрязнения с корпуса щетки мягкой сухой тканью. При необходимости смачивайте ткань в воде или мягком моющем средстве. Загрязненную поверхность также можно смочить водой, а затем протереть тканью.

- Несмотря на то, что щетка является водонепроницаемой, не погружайте ее в воду на длительное время.

- Не используйте для чистки летучие органические соединения, такие как бензин и растворитель. Это может испортить нанесенную краску или привести к повреждению устройства.

- После каждого использования промойте щетину водой.

- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвергайте сильному ударному воздействию.

- Храните щетку в недоступном для детей месте.

- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.

- Заменяйте насадку для щетки не реже одного раза в три месяца.

## 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Электрическая звуковая зубная щетка
Модель	CS Medica SonicPulsar CS-161
Потребляемая мощность	0,26 Вт
Источник питания	1 алкалиновый (щелочной) элемент питания типа AAA
Время работы от одного элемента питания	Около 150 дней (при условии, что щетка используется 2 раза в день по 2 минуты)
Частота колебаний	22000 движ./мин.
Рабочая температура / относительная влажность	0-50°C / 30-85%
Температура / относительная влажность при хранении	-20-60°C / 10-95%
Масса	23 г (без элемента питания)
Габаритные размеры	18 (диаметр) x 197 (высота) мм
Срок службы	Рукоятка - 4 года, Насадка - 3 месяца, Элементы питания - устанавливаются производителем этих элементов.
Комплект поставки	Рукоятка с насадкой, дополнительная насадка, защитный колпачок для щетины, алкалиновый элемент питания типа AAA, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

IPX7 Степень защиты корпуса зубной щетки от проникновения твердых предметов и воды



Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза



**Внимание!**

Прежде чем использовать прибор, внимательно прочтите данное руководство по эксплуата-ции.



**Правильная утилизация данного изделия (утилизация электрического и электронного оборудования)**

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утили-зации вместе с другими домашними отходами по окончании своего срока службы. Чтобы пре-дотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилиза-ции отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его на-длежащим образом для рационального повтор-ного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологи-чески безопасной переработки.

По вопросу утилизации элементов питания обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной инфор-мации о том, куда и как вернуть батареи для эко-логически безопасной переработки.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Срок гарантии (рукоятка) - 2 года**

**Срок гарантии (насадка) - 3 месяца**

Модель _____	
Серийный номер _____	
Дата продажи «__» _____г.	
_____	Подпись продавца
_____	_____
Штамп магазина	
С условиями гарантийного обслужива-ния ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил.	Подпись покупателя
_____	_____

Дата обращения «\_\_» \_\_\_\_\_г.  
Заклчение мастера, выполненные работы

\_\_\_\_\_

Дата выдачи (возврата) \_\_\_\_\_  
прибора потребителю \_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_г.

Подпись или штамп мастера \_\_\_\_\_

Работу принял \_\_\_\_\_  
(подпись клиента)



**СиЭс МЕДИКА**

**Прозвено по заказу и под контролем ООО «СиЭс Медика», Россия**

Официальным представителем торговой марки CS Medica на территории России является фирма ООО «СиЭс Медика»

Юридический адрес: 127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3

Почтовый адрес: 125413, Москва, ул. Солнечногорская, 4
Тел./факс: (495) 363-16-52, (495) 363-16-56

Центр технического обслуживания в Москве: 127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3 (м. «Маяковская»)
Тел/факс: (495) 221-73-45 (многоканальный)

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

E-mail: info@csmedica.ru, service@csmedica.ru (сервисный центр)

www.csmedica.ru

Производственное подразделение: NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD (НИНБО СИГОВ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД) No.239 Jianghu Road, Zone C Hongtang Industrial Park, Jiangbei District, Ningbo China. (№ 239 Цзянху Рoad, Зоун С Гонтанг Индустриал Парк, Цзянбэи Дистрикт, Нинбо Китай)

Сделано в Китае	
_____	
<b>АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКЦИИ CS MEDICA В РОССИИ:</b>	
<b>• Арзамас,</b> ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: 8 (831) 472-96-05, arz_cs@bk.ru	
<b>• Армавир,</b> ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Ефремова, д. 101, тел.: (86137) 58-202, cs_medicarm@mail.ru	
<b>• Архангельск,</b> ООО «СиЭс Медика Поморье», ул. Северовинская, д. 63, тел.: (8182) 64-09-55, pomorie@csmedica.ru	
<b>• Астрахань,</b> ООО «СиЭс Медика Астрахань», ул. Боевая, д. 13А, тел.: (8512) 38-20-78, astrahan@csmedica.ru	
<b>• Барнаул,</b> ООО «СиЭс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 188б, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22 cs-barnaul@mail.ru	
<b>• Белгород,</b> ООО «СиЭс Медика Белгород», ул. Архирейская, д. 2А, оф. 11 тел.: (4722) 42-12-94, belgorod@csmedica.ru	
<b>• Благовещенск,</b> ООО «СиЭс Медика Восточный Регион» (Иркутск), ул. Чайковского, д. 7, оф. 321, тел.: (4162) 42-12-23, csmedica_amur@tsl.ru	
<b>• Братск,</b> ООО «СиЭс Медика Восток» (Иркутск), ул. Гагарина, д. 16, оф. 4, тел.: (3953) 41-33-81, доб. 231, csmedica@bk.ru	

**• Брянск,**
ООО «СиЭс Медика Брянск», 2 Советский переулок, д.3, оф. №1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru

**• Великий Новгород,**
ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Мерещикова-Волосова, д. 9, тел.: 8 (951) 722-15-75, novgorod@csmedica.ru

**• Владивосток,**
ООО «СиЭс Медика Восточный Регион» (Иркутск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-dv@mail.ru

**• Владимир,**
ООО «СиЭс Медика Иваново», ул. Н.Дуброва, д. 30А, тел.: (4922) 54-14-28, 37-01-67, csmedica-ivanovo@mail.ru

**• Волгоград,**
ООО «СиЭс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru

**• Вологда,**
ООО «СиЭс Медика Вологда», Советский просп., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedika@vologda.ru

**• Воронеж,**
ООО «СиЭс Медика Черноземье», ул. Грамши, д. 73 а, тел.: (4732) 39-31-47, 39-18-54, voronezh@csmedica.vrn.ru

**• Екатеринбург,**
ООО «СиЭс Медика Урал», ул. Тургенева, 30А, тел.: (343) 222-74-75, med@csmedica-ural.ru

Сервисно-консультационный центр, ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service@csmedica-ural.ru

**• Иваново,**
ООО «СиЭс Медика Иваново», ул. Колесанова, д. 11/2, тел.: (4932) 29-08-74, csmedica-ivanovo@mail.ru

**• Ижевск,**
ООО «СиЭс Медика Вятка» (Киров), ул. Союзная, д. 49а, оф. 4, тел.: (3412) 36-76-60, csmedica18@mail.ru

**• Иркутск,**
ООО «СиЭс Медика Восток», ул. Карла Либкнехта, д. 121, тел.: (3952) 205-141, 206-687, 298-458, (3952) 298-456, 291-268, vostok@csmedicaikr.ru

**• Йошкар-Ола,**
ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), просп. Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, csm@mari-el.ru

**• Казань,**
ООО «СиЭс Медика Казань», ул.Чистопольская, д.81, офис 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, csmedica16-whh@mail.ru

**• Калининград,**
ООО «СиЭс Медика Калининград», ул. Нарвская, д. 49е, оф. 208, 206, тел.: (4012) 95-38-65, kaliningrad@csmedica.ru

**• Калуга,**
ООО «СиЭс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, 8 (903) 636-50-69, csmedica\_kaluga@mail.ru

**• Кемерово,**
ООО «СиЭс Медика Кемерово», ул. Саволова, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60 nikitin\_cs@mail.ru

**• Орёл,**
ООО «СиЭс Медика Орел», ул. 8 Марта, д. 8, тел.: (4862) 43-67-99, orel@csmedica.ru

**• Оренбург,**
ООО «СиЭс Медика Оренбург», ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 4, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru

**• Орехово-Зуево,**
ООО «СиЭс Медика Подмосковье», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (496) 412-64-27, cspodmoskovie@mail.ru

**• Киров,**
ООО «СиЭс Медика Вятка», Студенческий пр., д. 19, к. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, vyatka@csmedica.ru

**• Кострома,**
ООО «СиЭс Медика Иваново», просп. Миря, д. 51, тел.: (4942) 55-28-73, csmedica-ivanovo@mail.ru

**• Краснодар,**
ООО «СиЭс Медика Кубань», ул. Дзержинского, д. 40, тел.: (861) 210-01-92, 210-01-35, cs\_medica@kubannet.ru

**• Красноярск,**
ООО «СиЭс Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-98, info@csmedicaenisey.ru

**• Курск,**
ООО «СиЭс Медика Курск», ул. Заводская, д. 5а, оф. 1, тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, kursk@csmedica.ru

**• Липецк,**
ООО «СиЭс Медика Липецк» (Воронеж), ул. Угловая, д. 15, владение 7, тел.: (4742) 27-03-78, 28-14-70, lipetsk@csmedica.ru

**• Магнитогорск,**
ООО «СиЭс Медика Урал» (Екатеринбург), пр. К. Маркса, д. 143/3, тел.: (3519) 29-49-14, mgn@csmedica-ural.ru

**• Махачкала,**
ООО «СиЭс Медика Махачкала», ул. Аскерханова, д. 5В, оф. 1, тел.: (8722) 63-32-06, csmahachkala@mail.ru

**• Минеральные воды,**
ООО «СиЭс Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 10б, тел.: (87922) 6-02-31, факс 6-06-48, csmedicakmv@mail.ru

**• Мурманск,**
ООО «СиЭс Медика Карелия» (Петрозаводск), просп. Ленина, д. 5, оф. 1, тел.: (8152) 25-53-43, murtmansk@csmedica.ru

**• Набережные Челны,**
ООО «СиЭс Медика Казань», просп. Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru

**• Нижневартовск,**
ООО «СиЭс Медика Югра», просп. Победы, д. 266, оф. ОМРОН, тел.: 8 (902) 855-85-01, 8 (9088) 73-30-47 cstyumen@mail.ru, cs-nv86@yandex.ru

**• Нижний Новгород,**
ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru

**• Новокузнецк,**
ООО «СиЭс Медика Новокузнецк», ул. Суворова, д. 6, тел.: (3843) 74-22-30, novokuznetsk@csmedica.ru

**• Новороссийск,**
ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Энгельса, д. 8, тел.: (8617) 72-35-40, cs\_medicanov@mail.ru

**• Новосибирск,**
ООО «СиЭс Медика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru

**• Омск,**
ООО «СиЭс Медика Омск», ул. Косарева, д. 103, тел.: (3812) 21-03-00,25-54-66, 59-55-03. csmedika\_omsk@mail.ru

**• Пенза,**
ООО «СиЭс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru

**• Пермь,**
ООО «СиЭс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, 229-87-75, perm@csmedica.ru

**• Петрозаводск,**
ООО «СиЭс Медика Карелия», ул. Мерещкого, д. 16, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru

**• Псков,**
ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», ул. Леона Поземского, д. 10, помещение 1001, тел.: 8(911)885-07-56, csmedica.pskov@yandex.ru

**• Россошь,**
ООО «СиЭс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rossoch@csmedica.ru

**• Ростов-на-Дону,**
ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85(86), 231-04-85(86), (863) 231-07-87, rostov@csmedica.ru

**• Рязань,**
ООО «СиЭс Медика Рязань», ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 96-63-10, 96-93-66, ryazan@csmedica.ru

**• Самара,**
ООО «СиЭс Медика Самара», ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 300, тел.: (846) 267-38-33, 273-83-63, 273-83-22, csmedica-samara@sama.ru

Сервисно-консультационный центр, ул. Революционная, строение 1, оф. 118, тел.: (846) 267-38-40

**• Санкт-Петербург,**
ООО «СиЭс Медика Северо-Запад», пр-т Обуховской обороны, д. 120 лит. И, оф. 713, тел. (812) 309-09-80, (812)-316-55-00 csnw@csmedica.ru

Сервисно-консультационный центр, Малоетскоельский просп., д. 36, тел.: (812) 715-88-93, spbservice@csmedica.ru

**• Саранск,**
ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, 2 этаж, ком. №222, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru

**• Саратов,**
ООО «СиЭс Медика Саратов», ул. Шелковичная, д. 64/66, оф. 6, тел.: (8452) 57-84-60, 57-84-61, csmsaratov@mail.ru

**• Саров,**
ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), просп. Октябрьский, д. 18, тел.: (83130) 6-39-59, medica\_sar@mail.ru

**• Смоленск,**
ООО «СиЭс Медика Смоленск», просп. Гагарина, д. 60, тел.: (4812) 35-85-68, smolensk@csmedica.ru

**• Сочи,**
ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар), Центральный р-н, ул. Конституции СССР, д. 28, тел.: (8622) 64-74-67, cs\_medicasochi@mail.ru

**• Ставрополь,**
ООО «СиЭс Медика Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicastv@mail.ru

**• Старый Оскол,**
ООО «СиЭс Медика Белгород», ул. Ватутина, д. 54, тел.: (4725) 24-17-89, oskol\_cs@mail.ru

**• Сургут,**
ООО «СиЭс Медика Югра», ул. Университетская, д. 25, оф. ОМРОН, тел.: 8 (912) 817-41-41, 8 (9088) 73-30-47 cstyumen@mail.ru, cssurgut@mail.ru

**• Сызрань,**
ООО «СиЭс Медика Самара», ул. Московская, д. 4, тел.: (8464) 92-25-49, sismedica@mail.ru

**• Тамбов,**
ООО «СиЭс Медика Тамбов», ул. Чичканова, д. 48, №16, тел.: 8 (4752) 53-51-94, tambov@csmedica.ru

**• Тверь,**
ООО «СиЭс Медика Тверь», просп. Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, tver@csmedica.ru

**• Тольятти**
ООО «СиЭс Медика Самара», ул. Офицерская, дом ба, офис 4 тел.: (8482)74-88-89, 36-11-36 csmedica-itt@yandex.ru

**• Томск,**
ООО «СиЭс Медика Енисей» (Красноярск), ул. Нахимова, 13/1, оф. 304, тел.: (3822) 25-23-44, 41-23-51, tomsk@csmedicaenisey.ru

**• Тула,**
ООО «СиЭс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 19, тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru

**• Тюмень,**
ООО «СиЭс Медика Тюмень», ул. Амурская, д. 2, оф. 2, тел.: 8-908-873-30-47, (3452) 30-46-17, cstyumen@mail.ru

**• Улан-Удэ,**
ООО «СиЭс Медика Восток» (Иркутск), ул. Свердлова, д. 12г, оф. 101, тел.: (3012) 21-82-29, csmedicabur@mail.ru

**• Ульяновск,**
ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica.uln@yandex.ru

**• Уфа,**
ООО «СиЭс Медика Башкортостан», ул. Натальи Ковшовой, д. 10, тел.: (3472) 34-18-08, csmedica.ufa@mail.ru

**• Хабаровск,**
ООО «СиЭс Медика Восточный Регион» (Иркутск), ул. Ким-Ю-Чена, д. 44/И, оф. 3, тел.: (4212) 41-12-65, csmedica\_hab@mail.ru

**• Чебоксары,**
ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, csm-ch@mail.ru

**• Челябинск,**
ООО «СиЭс Медика Урал» (Екатеринбург), ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chel@csmedica-ural.ru

**• Череповец,**
ООО «СиЭс Медика Вологда», ул. Краснодонцев, д. 24, оф. 1, тел.: (8202) 20-55-33, csmedicacherepovets@rambler.ru

**• Чита,**
ООО «СиЭс Медика Восточный Регион» (Иркутск), ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, тел.: (3022) 32-49-03, csmedica-chita@mail.ru

**• Шахты,**
ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Ионова, д. 110 а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuhti@csmedica.ru

**• Ярославль,**
ООО «СиЭс Медика Ярославль», ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18 тел.: (4852) 90-66-53, 20-12-50, 73-11-82 yaroslavl@csmedica.ru